

動物用X線撮影補助具 カタログ



DR-Cowboy
Package



Podoblock



Redboot



Jpiジャパンは顧客満足を第一に考え、ユニークで優れた機能を持つ放射線関連製品を海外から輸入しご提供しております。

日本はサラブレッドの生産数が世界で第五位であり、サラブレッド生産大国と言われてますが、一方で、馬の状態を知るために重要なX線撮影は非常に大変な作業にも関わらず、撮影を円滑にする撮影補助具はほとんどなく、今まで作業者の大きな負担となっていました。

そこでJpiジャパンは、オランダで競走馬X線撮影の補助具を専門開発しているPodoblockをご紹介することになりました。Podoblockの製品をご使用いただくことで、重作業である競走馬の撮影効率を向上させ、最適な画像をよりスムーズに取得することができます。

また競走馬だけでなく、産業動物や水族館、動物病院でもご使用いただけるPodoblockの製品はCEマークを取得しており、欧州で認められた高い品質でご好評をいただいておりますので、防護エプロンやFPD保護ホルダーと併せて是非一度ご検討ください。



お得なセット商品

DR-Cowboy Package DRカウボーイパッケージ



安全に快適にX線撮影ができるよう必要な器具をすべて組み合わせたパッケージです。



- 診療所および野外どちらでも最適な環境で撮影が行えます。
- 本パッケージには下記の製品が含まれます。


- Podoblock
- DR-Cowboybox
- DR-Combibox LM/AP
- Combibox Dummy LM



製品紹介動画はこちらから

ポジショニングブロック

Podoblock ポドブロック

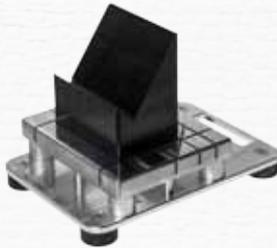

- 常に同じ角度で蹄を固定できるポジショニングブロックです。
- Podo-Protectionbox、またはCowboyboxと併用いただくことで最適な撮影距離を保持することができ、撮影者が離れて撮影することが可能です。

- ・ベースの高さは90mm、120mm、170mmから選択可能
- ・重量:6.5kg ・アルミ製 ・ゴム脚付
- ・お好きな角度のTopblockを1つ選択可能

<オプション>

Topblock + optional Wedge

- 5°刻みで45°~60°の多様な角度をご用意しています。
- ・ブロックは簡単に交換可能
- ・ポリエチレンPE500製、黒色のみ



Topblock Flatplate

- 足を平らに立てた状態で撮影が可能です。
- ・ポリエチレンPE500製、黒色のみ



MagRayCloxx マグレイクロックス



- 蹄型マグネット付きのポジショニングブロックです。
- 作業速度を早めることができ、麻酔で鎮静化させる必要がなくなります。
- 追加固定のためのラップが付属されているので、素足の馬でも使用できます。

- ・ポリエチレンPE500製 ・底面滑り止め加工アリ



X線撮影装置オプション

JiXtr ジクスター



- 携帯型X線撮影装置の保持スタンドです。
- 装置の後ろに立って操作できるので安全に撮影が行えます。
- すべての撮影に必要な高さ、角度、スポットに簡単に調節できます。
- 角度はフリー調節なので、正確なスカイラインビューを撮影できます。
- 全ての装置と互換性があり、15kgまで搭載可能です。

- ・軽量アルミ製
- ・収納時寸法:12*15*75cm
- ・最大寸法:27*29*201cm
- ・移動幅:165cm




カセット/FPDホルダー

Podoholder ポドホルダー



- Podoblockと組み合わせて使用することで、カセットを保護し、常に安定した位置で撮影を行うことができます。
- 垂直位置で固定されるため、撮影者はカセット保持の必要がなく、X線の被ばくを防ぐことが可能です。

・対応サイズ: 六切、四切、
18*24cm、24*30cm

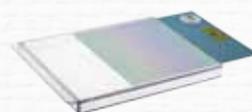

DR-Podo-Protectionbox DRポドプロテクションボックス



- Podoblockでの固定用5mmアダプタ付で、蹄検査の際に常に同じ方向と角度で撮影することが可能です。
- DRシステムに応じて筐体にはグリップハンドルが取り外し可能なGrepstr 2.1が付いています。

※ 固定用5mmアダプタのないモデルもございます。

Knee Holder ニーホルダー



- 伸縮式保持スティックを搭載し、膝撮影でのポジショニングが迅速に行えます。
- 左右どちらのポジションも瞬時に切り替えることが可能です。

・アナログカセット、CRカセット用
・高耐久軽量ポリカーボネート製
・対応サイズ: 六切、四切、18*24cm、24*30cm

DR-Cowboybox DRカウボーイボックス



- Podo-ProtectionboxとDistance Cassette Holderのコンビモデル
- 斜め位置でも固定することが可能です。
- FPDに応じて筐体にはグリップハンドルが取り外し可能なGrepstr 2.1が付いています。
- 30cmのSupport Foot付

※ 固定用5mmアダプタのないモデルもございます。



DR-Combibox SET DRコンビボックスセット



- スカイライン撮影に最適な5°の傾斜がついた撮影台です。
- 裏返しにすることで平面での撮影も可能です。
- DR-Podo-Protectionboxとご使用いただくことでハンズフリー撮影が可能です。
- 脚が同じ高さになるようにダミーを付属したセットです。

※ それぞれ個別での購入も可能です。



DR Pouch DRパウチ



- 合皮とクッションを使用した肌当たりの良いカセットカバーです。
- 持ち運びに便利なラバーグリップハンドル付
- 側面が透明になっているためFPDの側面LEDなどが装着したまま確認できます。

・アナログカセット、CRカセット、FPD用
・対応サイズ: 四切、半切、17*17"

馬用撮影補助具

超音波装置オプション

NewCart ニューカート



30cm 45cm 75cm 106cm

- 頑丈で、高さ調節が可能な超音波装置撮影台です。
- ガススプリングを用いており、台の昇降がスムーズです。
- 下部に収納スペースが付いており、機材などの保管ができます。
- ハンドル付きのため、移動の際の持ち運びが簡単です。

- ・ 重量: 19kg ・ 収納時寸法: 42 x 62 x 30cm
- ・ 移動幅: 30~106cm ・ 耐荷重: 15kg

<オプション>

ProbeRack

- 超音波プローブ用ラックが付属できます。



矯正及び救急処置用サポートブーツ

Redboot レッドブーツ



仔馬用矯正ブーツ 救急圧縮ブーツ 関節矯正ブーツ



仔馬用矯正ブーツ Corrective Foal Boot

- 四肢の屈曲異常や腱の収縮の矯正
- 四肢の変形や足部の外向肢勢・内向肢勢の矯正
- 負傷後の痛みによって起こる後天的収縮予防
- 遠位肢の永続的及び一時的な固定
(骨折、腱や体の怪我、傷等のより優れたケアにお使いいただけます。)

救急圧縮ブーツ Emergency Compression Boot

- 遠位肢の固定
- 突発的な損傷の固定
- 顆状突起、種子骨やP1, P2, P3の骨折(通常の角度固定が必要な場合)
- 創部のケア(固定が必要な場合)

関節矯正ブーツ Articulated Corrective Brace

- 肢の屈曲異常、腱の収縮の矯正
- 肢の変形や手根骨内反及び外反の矯正
- 痛みによる四肢の収縮予防
- 永続的及び一時的な四肢用の固定具

※ 関節矯正ブーツは前脚のみにお使い頂けます。

移動型の診療作業台

Mobile Work Station 移動型ワークステーション



- 診療器材をひとまとめにして持ち運ぶことが可能です。
- 移動に便利にマルチカートタイプ
- 変形する事で診療の作業台スペースとして使用可能です。



製品紹介動画は
こちらから

UniRay社 X線防護製品

UniRayエプロン

UniRay



- オリジナルの遮へいシートを使用した柔らかい軽量エプロンです。
- 前面を防護するコートエプロンタイプ
- 肩パッド内蔵で着心地が良く、長時間の着用でも疲れません。
- 多彩なカラーバリエーションからお気に入りのエプロンを製作可能です。

- ・ LiteLead(含鉛)、MaxLite(含鉛軽量)、KRYPTOLITE(無鉛最軽量)
- ・ サイズ:S(55×90cm)、M(60×100cm)、L(60×110cm)
- ・ 鉛当量:0.25mmPb、0.35mmPb、0.50mmPb
- ・ マジックテープベルト、バックルベルト



※ BAMBINO、RETRO、HOOPはナイロン素材になります。



UniRayミトン



- オリジナルの遮へいシートを使用したミトンです。
- 高い遮へい力があり、安全にご使用いただけます。
- カラーチャートからお好みの色を選ぶことが可能です。

- ・ LiteLead(含鉛)
- ・ 鉛軽量:0.25mmPb、0.35mmPb、0.50mmPb
- ・ Unitexタイプ

※ Unitexはエプロンと同じ生地です。



UniRayグローブ



- 手術時にご使用いただけるラテックスタイプの薄手グローブです。
- 素手に近い使用感を重視し、用途に応じて2種類の厚みをご用意しています。
- ラテックスフリーもございます。

- ・ PRIME(薄手、0.35mm)、SHEER(超薄手、0.25mm)
- ・ サイズ:6.5~9.0
- ・ ラテックス、ラテックスフリー



Reina Imaging社 FPD保護ホルダー

PAG

Reina Imaging



- FPDやCRカセットを保護するホルダーです。
- ハンドル付なので落下リスクを軽減し、撮影台でのポジショニングが簡単に行え、素早く撮影をすることができます。(ハンドル無しタイプもあります)
- プラスチック製で爪や排泄などの傷・汚れからFPDを保護します。
- グリッド付を選択いただければ位置合わせの手間なく迅速に撮影が行えます。

- ・ サイズ:17×17"、14×17"、11×14"、10×12"
- ・ グリッドあり、グリッドなし
- ・ グリッド標準仕様:40本 6:1 100cm
- ・ 横型、縦型

※ 上記記載のないモデルもございますのでお問い合わせください。



製品コード一覧

製品名	製品No.
-----	-------

ポジショニングブロック

Podoblock	
BE 90mm + TB 45°	PB 01AL090-45
BE 90mm + TB 50°	PB 01AL090-50
BE 90mm + TB 55°	PB 01AL090-55
BE 90mm + TB 60°	PB 01AL090-60
BE 90mm + TB 60° UP	PB 01AL090-60UP
BE 120mm + TB 45°	PB 01AL120-45
BE 120mm + TB 50°	PB 01AL120-50
BE 120mm + TB 55°	PB 01AL120-55
BE 120mm + TB 60°	PB 01AL120-60
BE 120mm + TB 60° UP	PB 01AL120-60UP
BE 170mm + TB 45°	PB 01AL170-45
BE 170mm + TB 50°	PB 01AL170-50
BE 170mm + TB 55°	PB 01AL170-55
BE 170mm + TB 60°	PB 01AL170-60
BE 170mm + TB 60° UP	PB 01AL170-60UP

Topblock	
Topblock 45°	TBO 250045
Topblock 50°	TBO 250050
Topblock 55°	TBO 250055
Topblock 60°	TBO 250060
Topblock 60° UprightPedal	TBD 0250060
Topblock Wedge 10°	TBW 0250010
Topblock Flatplate AP	TBF 02500AP
Topblock Flatplate LM /AP	TBF 02500LMAP
Topblock Flatplate LM /AP 45°	TBF 0250045

MagRayCloxx	
2 Blocks/1 Hand dispenser/5 Foil rolls	MRC 01SET2-5
4 Blocks/1 Hand dispenser/12 Foil rolls	MRC 01SET4-12
1 Hand dispenser/12 Foil rolls	MRC 01FOIL1-12

X線撮影装置オプション

JiXtr	
JiXtr	JSM 09JIXTR-14

カセット/FPDホルダー

DR-Cowboybox Package	
14 x 17"	DR 08ISO1417 P
10 x 12"	DR 08ISO1012 P

Podoholder	
14 x 17"縦	PHB 03354318
10 x 12"	PH 03283318
10 x 12"縦	PHB 03283318
8 x 10"	PH 03232818
8 x 10"縦	PHB 03232818

DR-Podo-Protectionbox	
14 x 17"	DR 07ISO1417
10 x 12"	DR 07ISO1012

Knee Holder	
10x 12"	KH 04283318
8 x 10"	KH 04232818

製品名	製品No.
-----	-------

カセット/FPDホルダー

Distance Cassette Holder	
DCH 14 x 17"	ACB 04354318
DCH 10 x 12"	AC 04283318
DCH 8 x 10"	AC 04232818
DR Pouch	
17 x 17"	DR 11ISO1717
14 x 17"	DR 11ISO1417
10 x 12"	DR 11ISO1012
DR-Cowboybox	
14 x 17"	DR 08ISO1417
10 x 12"	DR 08ISO1012
DR-Combibox SET	
14 x 17"	DR 06ISO1417 S
10 x 12"	DR 06ISO1012 S

超音波装置オプション

NewCart	
NewCart	VS 10NCART
NewCart + ProbeRack	VS 10NCART C

矯正及び救急処置用サポートブーツ

Redboot	
Redboot 仔馬用矯正ブーツ	RED 10CFB
Redboot 救急圧縮ブーツ(R)	RED 10ECBR
Redboot 救急圧縮ブーツ(L)	RED 10ECBL
Redboot 関節矯正器具(R)	RED 10ACBR
Redboot 関節矯正器具(L)	RED 10ACBL

移動型の診療作業台

Mobile Work Station	
Storage, Transport & Workspace Trolley Base element	MWS 14WT-BE

X線防護製品

UniRayエプロン	
CoatApron- LITELEAD - 0.25mmPb - ベルクロー- S	UCALS21V
CoatApron- LITELEAD - 0.25mmPb - ベルクロー- M	UCALS22V
CoatApron- LITELEAD - 0.25mmPb - ベルクロー- L	UCALS23V

UniRayミトン	
Mittens - LITELEAD - 0.25mmPb	UGMLS2
Mittens - LITELEAD - 0.35mmPb	UGMLS3

UniRayグローブ	
UniRayグローブ PRIME	USGP4
UniRayグローブ SHEER	USGS2

FPD保護ホルダー(グリッドなし)

Mobile DRP Holder	
17 x 17"	PDRNG17
14 x 17"	PDRNG
14 x 17" 縦	PVDRNG
11 x 14"	PDRNG801C
11 x 14" 縦	PVDRNG801C
10 x 12"	PDRNG10
10 x 12" 縦	PVDRNG10

FPD保護ホルダー(グリッドあり)

PAG DRP Encasement	
17 x 17"	PDR17
14 x 17"	PDR
14 x 17" 縦	PVDR
11 x 14"	PDR801C
11 x 14" 縦	PVDR801C
10 x 12"	PDR10
10 x 12" 縦	PVDR10

※ 上記表に記載のない仕様もございます。お気軽にお問い合わせください。



Jpi Japan
Improving Quality of Life

販売元 Jpiジャパン株式会社
〒124-0004 東京都葛飾区東堀切3-11-2 Jpi Gビル
Tel : 03-6686-7909 Fax : 03-6679-3281
Web : www.jpj-med.co.jp

PODOBLOCK
Re-imagine the way you work

製造元 Podoblock bv
Verlengde Nijverheidsweg 10
9482 WT Tynaarlo The Netherlands
Tel : 0031-50-8200-257
Web : <https://podoblock.com>